

iLink is ideal for:

各種ラボ用機器のスタッカーとして



各種ラボ用機器をリンクさせた
簡易アッセイシステムとして(*1)

日常業務を簡単操作でサポート

iLinkに後はお任せ下さい!!

iLink

Let Us Go To Work For You

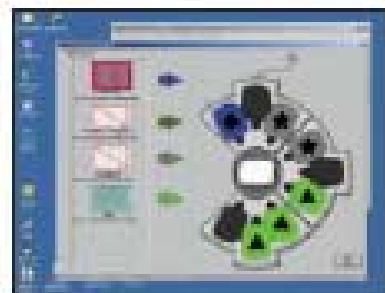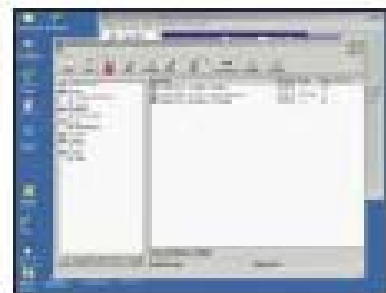

**作成されたアプリケーションを
ポイント&シュートで実行!!**

iLinkは“ポイント&シュート”で
プロトコルを自動化。

プロトコル名をメインコントロール
画面上のリストから選択しスタート
ボタンをクリックするだけの簡単
操作です。
システムのセットアップ確認も
同様に、クリックいただくだけで
簡単にご確認いただけます。
例えば、マテリアルのセットアップ
もGUIや、テキストリストで
プロシージャのシーケンスの
プレビューや、接続されている
機器のメソッドもプルダウン
リストから選択できます。

**卓越のプロシージャエディターと
機器パラメータのランタイム選択!!**

iLinkのプロシージャエディター
でプロシージャ作成もドラッグ
&ドロップで簡単作成

個々のマテリアルの動き、接続
された機器のメソッド、時間管理
等をステップをおって作成出来
ます。

マテリアルセットアップの確認!!

iLinkでは、数々のマテリアルを
使用することが出来ます。

例えば、標準マイクロプレート
ディープウェルプレート、ディスコ
チップ等です。
単純に、TwisterIIのどのラックに
どのマテリアルがあるのかを指定
するだけで、プレートの枚数を
指定する必要がありません。



**Twister II adapts to
over 100 instruments**

Zymark

www.zymark.co.jp

P/N 103597 CD-Interface, Twister II iLink

推奨システム仕様

Pentium II processor
>400 MHz
Windows NT OS, Service
Pack 6 or Windows 2000 Service Pack OS
128 MB RAM
500 MB free hard disk space
CD ROM drive
SVGA display monitor, 1024 x 768,
256 colors
IE 5.5 or later
Network Interface Card



iLink™
Easy Automation
Software

Zymark Offices Worldwide

France
Zymark S.A.
ZAC PARIS-NORD II
13 rue de la Poix
BP 40016
93111 Reilly-Charles de Gaulle Cedex
Telephone: +33-1-48-63-71-35
Fax No: +33-1-48-63-71-53

Benelux
Zymark Benelux NV/SA
Kapsstraat 13
B-1700 Tervuren
Belgium
Telephone: +32-53-66-26-70
Fax: +32-53-66-27-32

Germany
Zymark GmbH
Eisenstr. 1c
DE-65428 Hattersheim
tel: +49 6742 834 93-0
fax: +49 6742 162 821

Japan
Zymark Japan
Saito Bldg. 2F
Yushima 2-17-15, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0034
Japan
Telephone: + 81-3-5840-6551
Fax: + 81-3-5840-6554

Zymark (Schweiz) AG
Nordstrasse 17
CH-4660 Olten
Switzerland
Telephone: + 41-62-788-3000
Fax: + 41-62-788-3017

United Kingdom
Zymark Limited
1 Welbeck
Preston Brook
Barnock, Cheshire WAT 3AZ
Telephone: +44-1528-711448
Fax No: +44-1528-791228

Zymark

Zymark Corporate Headquarters
Zymark Corporation
Zymark Center
Hopkinton, MA 01748-1928
Telephone: 508-435-9500
Fax No: 508-435-3420
E-mail: solutions@zymark.com
Website: www.zymark.com
© 2003 Zymark Corporation.

Zymark has representatives in major countries
worldwide. Call for more information.

iLink and Zymark are trademarks of Zymark
Corporation. Twister is a registered trademark of
Zymark Corporation. All other company trademarks
are the property of their respective holders.
LT 0213

science driven automation

Zymark